



**FERRI DERM-EXPERT 2 + +
BODY SHAPER
MIKRODERMABRAZJA
DIAMENTOWA + PEELING
KAWITACYJNY+
ULTRADŹWIĘKI +
ŚWIATŁOTERAPIA +
DERMOMASAŻ +
MEZOTERAPIA**

5850 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

FERRI DERM-EXPERT został wyposażony w innowacyjny zespół filtrujący, który pozwala na eksploatację urządzenia bez używania filtrów bawełnianych czy siateczkowych.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

PROGRAMY ZABIEGOWE

- * okolice oczu,
- * revital 20+,
- * revital 30+,
- * odmładzanie 40+,
- * lifting 45+,
- * trądzik,
- * ujędrnianie,
- * cellulit,
- * wyszczuplenie,
- * rozstępy,
- * na skórę głowy,
- * na bóle mięśni,

DZIAŁANIE

- * błyskawiczny lifting twarzy,
- * poprawa kolorytu skóry,
- * działanie odmładzające i regenerujące,
- * dotlenienie i odżywienie tkanek,
- * modelowanie.

- * rozjaśnianie przebarwień skóry,
- * spłycenie blizn,
- * stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,

- * oczyszczanie cery,
- * likwidacja zmarszczek.

PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA + ULTRADŹWIĘKI

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają miniekspluzjom, wytwarzając mikroenergię, która usuwa martwe już korneocyty.

ZALETY

- * mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- * urządzenie do pracy ciągłej,
- * 3 rodzaje sterowania łopatką,
- * łączenie z jonoforezą,
- * 2 głowice o ergonomicznych kształtach.

DERMOMASAŻER

Urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomassager jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

Urządzenie wyposażone jest wyświetlacz LCD wyświetlający czas zabiegu oraz aktualną moc ssącą.

Zmiana siły mocy ssącej odbywa się całkowicie cyfrowo, co daje nam możliwość jej najdokładniejszego doboru, inaczej niż jest to w urządzeniach typu analogowego.

DZIAŁANIE

- * modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- * zmniejszenie cellulitu,
- * ujędrnienie ciała,
- * wspomaganie drenażu limfatycznego,
- * poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- * spłycenie blizn,
- * niwelacja rozstępów,
- * możliwość stosowania wraz z kosmetykami,

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

czas pracy	0-30 min
moc	60 W
bezpiecznik	2A
napięcie	230 V-50Hz
maksymalne podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

PEELING KAWITACYJNY + ŚWIATŁOTERAPIA + ULTRADŹWIĘKI

czas pracy	0-30 min
częstotliwość głowic UD	1Mhz
max. moc głowic UD	1W/cm2
bezpiecznik	1,2A
napięcie	230 V-50Hz
łopatka do peelingu	25kHz
łopatka do pracy ciągłej	tak
światłoterapia	kolor czerwony
światłoterapia	kolor niebieski
prąd galwaniczny	+/- 6mA


DERMOMASAŻER

czas pracy	0-60 min
bezpiecznik	1,6A
napięcie	230 V-50Hz
moc urządzenia	60 W
podciśnienie	-5-20 inHg

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
napięcie wejściowe	220 – 230V
moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,28 W/cm ²
zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
zakres skali pulsacji (wypełnienia)	5% – 100%



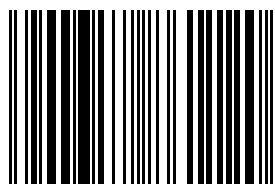

5904358861120