

## **FERRI MOBILNY LIFTING PODCIŚNIENIOWY Z TENS, MEZOTERAPIA TTS, CELLULOGIA**

6900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS (ELEKTROPORACJA, ULTRADŹWIĘKI), CELLULOGIA (MASAŻ PODCIŚNIENIOWY ALUMINIOWYMI GŁOWICAMI).

### PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Masaż próżniowy w połączeniu z elektrostymulacją TENS działa wzmacniająco na mięśnie twarzy, ujędźnia skórę oraz stymuluje układ limfatyczny. Skrót TENS wywodzi się od (transcutaneous electrical nerve stimulation – przezskórna elektryczna stymulacja nerwów).

## DZIAŁANIE

- \* pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyśpieszenie gojenia, usunięcie obrzęków,
- \* zapobieganie zanikom mięśniowym – utrzymanie mięśni w ruchu bez obciążania stawów,
- \* lepsze odżywianie tkanek,
- \* szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych,
- \* działanie przeciwbólowe,
- \* regulowanie napięcia.

Masaż próżniowy jest połączeniem masażu mechanicznego z podciśnieniem. Jednocześnie podczas zabiegu odciągane są fałdy skóry (zassanie) i rolowane ruchomymi rolkami. Masaż ten często nazywany jest lipomasażem.

Podczas masażu całe ciało, z wyjątkiem piersi, masuje się przy pomocy specjalnej głowicy wyposażonej w ruchome rolki i rodzaj ssącej rury. Rolki obracają się wokół własnych osi i masują zassany do głowicy fałd skóry. Poprawia to krążenie krwi i przepycha limfę.

## CELLULOGIA (MASAŻ PODCIŚNIENIOWY ALUMINIOWYMI GŁOWICAMI)

Cellulogia to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Cellulogia jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

## DZIAŁANIE

- \* modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- \* zmniejszenie cellulitu,
- \* ujędrnienie ciała,
- \* wspomaganie drenażu limfatycznego,
- \* poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- \* spłycenie blizn,
- \* niwelacja rozstępów,
- \* możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

## MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS (ELEKTROPORACJA, ULTRADŹWIĘKI)

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

## PROGRAMY ZABIEGOWE

- \* okolice oczu,
- \* revital 20+,
- \* revital 30+,
- \* odmładzanie 40+,
- \* lifting 45+,
- \* trądzik,
- \* ujędrnianie,
- \* cellulit,
- \* wyszczuplenie,
- \* rozstępy,
- \* na skórę głowy,
- \* na bóle mięśni.

## DZIAŁANIE

- \* błyskawiczny lifting twarzy,
- \* poprawa kolorytu skóry,
- \* działanie odmładzające i regenerujące,
- \* dotlenienie i odżywienie tkanek,
- \* modelowanie.

### PODCIŚNIENIOWY LIFTING Z TENS

Częstotliwość	120 Hz
Siła prądu TENS 0	6.4 mA
Podciśnienie 0	0,8 bar

### MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TTS


Zakres czasu pracy	30 sekund - 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Moc wyjściowa	0,04 W/cm <sup>2</sup> - 0,28 W/cm <sup>2</sup>
Zakres natężenia	0,0 mA - 6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% - 100%

### CELLULOGIA

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60 W

Podciśnienie

5-20 inHg

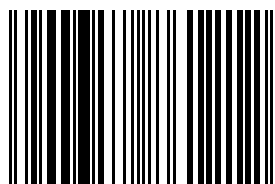

5904358861212