



**FERRI MULTIDERM
OXYBRAZJA +
MIKRODERMABRAZJA
DIAMENTOWA + PEELING
KAWITACYJNY+
ULTRADŹWIĘKI +
ŚWIATŁOTERAPIA +
JONOFOREZA +
DERMOMASAŻ +
MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA**

12800 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Kompaktowych rozmiarów kombajn kosmetyczny zawierający 8 funkcji zabiegowych (w tym oxybrazję 10 Bar).

FUNKCJE URZĄDZENIA

- * oxybrazja,
- * mikrodermabrazja diamentowa,
- * peeling kawitacyjny,
- * ultradźwięki,
- * światłoterapia,
- * jonoforeza,
- * dermomasaż,
- * mezoterapia bezigłowa.

OXYBRAZJA

Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz tlenu. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją. Obok działania peelingu, oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem.

Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej. Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

DZIAŁANIE

- * rozjaśnianie przebarwień skóry,
- * spłylenie blizn,
- * stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- * oczyszczanie cery,
- * likwidacja zmarszczek.

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADŹWIĘKI, SONOFOREZA, ŚWIATŁOTERAPIA LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN, JONOFOREZA, ELEKTROSTYMULACJA PRĄDEM

NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już keratocyty.

ZALETY

- * mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- * urządzenie do pracy ciągłej,
- * 3 rodzaje sterowania łopatką,
- * łączenie z jonoforezą,
- * 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

DERMOMASAŻER

Dermomasażer to urządzenie do wykonywania masażu podciśnieniowego, którego głównym działaniem jest rozpad "zrazików" tłuszczowych i przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii przywrócenie prawidłowego funkcjonowania naczyń włosowatych i limfatycznych w skórze. Dermomasażer jest odpowiednikiem masażu ręcznego, często stosowanego w fizykoterapii.

DZIAŁANIE

- * modelowanie ciała – redukcja tkanki tłuszczowej,
- * zmniejszenie cellulitu,
- * ujędrnienie ciała,
- * wspomaganie drenażu limfatycznego,
- * poprawa ukrwienia i odżywienia skóry,
- * spłycenie blizn,
- * niwelacja rozstępów,
- * możliwość stosowania wraz z kosmetykami.

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

PROGRAMY ZABIEGOWE

- * okolice oczu,

- * revital 20+,
- * revital 30+,
- * odmładzanie 40+,
- * lifting 45+,
- * trądzik,
- * ujędrnianie,
- * cellulit,
- * wyszczuplenie,
- * rozstępy,
- * na skórę głowy,
- * na bóle mięśni,

DZIAŁANIE

- * błyskawiczny lifting twarzy,
- * poprawa kolorytu skóry,
- * działanie odmładzające i regenerujące,
- * dotlenienie i odżywienie tkanek,
- * modelowanie.

URZĄDZENIE WYMAGA PODŁĄCZENIA BUTLI TLENOWEJ - BRAK BUTLI W ZESTAWIE.

OXYBRAZJA

	Oxybrazja przygotowana jest do pracy na czystym tlenie z zastosowaniem butli tlenowej bez pompy powietrza
	Reduktor zmniejszający ciśnienie z 200 bar do 6 bar, maksymalne ciśnienie na pistolecie – 10 bar
	Pistolet oraz sól fizjologiczna w zestawie
	Możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w zakresie od 0-50gr/min
	Możliwość pełnej regulacji natężenia przepływu tlenu
	Możliwość dawkowania kosmetyków podczas zabiegu (mezoterapia tlenowa)

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Czas pracy	0-30 min
Moc	60 W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz

Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)
--	----------------------

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADŹWIĘKI, SONOFOREZA, ŚWIATŁOTERAPIA LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN, JONOFOREZA, ELEKTROSTYMULACJA PRĄDEM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI


Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Częstotliwość peelingu kawitacyjnego	25KHz
Łopatka do pracy ciągłej	tak
Światłoterapia	kolor czerwony
Światłoterapia	kolor niebieski
Prąd galwaniczny	+/- 6mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz
Max. moc głowic UD	1W/cm2

DERMOMASAŻ

Czas pracy	0-60 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	60W
Podciśnienie	5-20 inHg

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA

Zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Napięcie wejściowe	220 – 230V
Moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,28 W/cm ²
Zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
Zakres skali pulsacji (wypełnienia)	5% – 100%

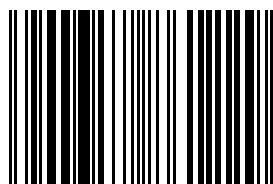

5904358861229