



KOMBAJN KOSMETYCZNY MOBILNY 12W1

14000 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI (WYPRODUKOWANE W POLSCE).

CO WYRÓŻNIA NASZĄ OFERTĘ?

- Gwarancja 24 miesiące,
- Bezpłatne konsultacje z serwisantem,
- BEZPŁATNE, PROFESJONALNE SZKOLENIE (WŁĄCZNIE Z OPIEKĄ TELEFONICZNĄ PO SZKOLENIU),
- Bezpłatne skrypty szkoleniowe,

-Wieloletnie doświadczenie.

CO WYRÓŻNIA NASZE URZĄDZENIA?

-Zgodność aparatury z normami europejskimi potwierdzona deklaracjami zgodności producenta,

-Urządzenia zostały zaprojektowane od podstaw w Polsce, w oparciu tylko i wyłącznie o europejskie podzespoły,

-Zastosowanie najwyższej jakości podzespołów i materiałów uczyniło nasze kombajny bezawaryjnymi, zostawiając w tyle podobne urządzenia,

-Nowoczesny design i staranność wykonania, zadowalająca nawet najbardziej wymagających klientów,

-Doskonała proporcja między ceną, jakością, oraz ilością funkcji urządzenia,

-Nowe technologie, dostępne tylko w naszych kombajnach,

-Urządzenia wykonane są na indywidualne zamówienie,

-Tylko u nas możecie Państwo zamówić urządzenie w dowolnej kolorystyce, z logo swojego gabinetu!

OFERTA DOTYCZY KOMBAJNU KOSMETYCZNEGO WYPOSAŻONEGO W FUNKCJE:

SEGMENT NR1

- Peeling kawitacyjny,
- Sonoforeza,
- Światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski,
- Ultradźwięki,
- Galwan,
- Jonoforeza,
- Elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości,
- Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała,
- Mikrodermabrazja diamentowa,
- Analizer skóry.

Segment nr2

- Fale radiowe bipolarne,
- Laser w głowicach fal radiowych.

OPIS FUNKCJI:

-Peeling kawitacyjny, ultradźwięki, sonoforeza, światłoterapia LED, kolor czerwony i niebieski, galwan, jonoforeza, elektrostymulacja prądem niskiej częstotliwości:

Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już keratocyty.

Zalety:

- Mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- Urządzenie do pracy ciągłej,
- 3 rodzaje sterowania łopatką,
- Łączenie z jonoforezą,
- 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

-Mezoterapia bezigłowa twarzy i ciała, mezoterapia bezigłowa trychologiczna:

Mezoterapia bezigłowa to zabieg polegający na wprowadzaniu substancji aktywnych do skóry w wyniku zjawiska elektroporacji. Mechanizm ten wykorzystuje TRANSDERMALNY SYSTEM TERAPEUTYCZNY TTS polegający na wprowadzaniu określonej substancji leczniczej do organizmu przez warstwę naskórka i skóry właściwej z wykorzystaniem optymalnego połączenia sonoterapii (sonoforeza) z impulsami prądowymi (jonoforeza). Mezoterapia bezigłowa stanowi doskonałą alternatywę dla mezoterapii igłowej.

Programy zabiegowe:

- Okolice oczu,
- Revital 20+,
- Revital 30+,
- Odmładzanie 40+,

- Lifting 45+,
- Trądzik,
- Ujędrnianie,
- Cellulit,
- Wyszczuplenie,
- Rozstępy,
- Na skórę głowy,
- Na bóle mięśni.

Działanie:

- Błyskawiczny lifting twarzy,
- Poprawa kolorytu skóry,
- Działanie odmładzające i regenerujące,
- Dotlenienie i odżywienie tkanek,
- Modelowanie.

-Fale radiowe Bipolarne, laser w głowicach fal radiowych:

Fale radiowe to urządzenie emitujące falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, której działaniem biologicznym jest wytworzenie diatermi w obrębie skóry właściwej. W wyniku działania ciepła fibroblasty zostają pobudzone do produkcji kolagenu, a obecne włókna kolagenowe ulegają regeneracji, dając efekt liftu skóry.

Efekty działania:

- Ujędrnienie i poprawa owalu twarzy,
- Szybkie spłycenie zmarszczek,
- Możliwość stosowania kosmetyków podczas zabiegu,
- Likwidacja cieni pod oczami,
- Odmłodzenie i regeneracja,
- Pobudzenie komórek skóry do produkcji kolagenu i elastyny,
- Ujędrnienie i modelowanie, poprawa ukrwienia wybranych partii ciała,
- Skuteczna walka z cellulitem.

-MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA:

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia.

W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

Działanie:

- Rozjaśnianie przebarwień skóry,
- Spłycenie blizn,
- Stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- Oczyszczanie cery,
- Likwidacja zmarszczek.

-ANALIZER SKÓRY:

KOMBAJNY MOBILNE NAJNOWSZEJ GENERACJI Z ROCZNIKA 2017
(WYPRODUKOWANE W POLSCE)

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Częstotliwość peelingu kavitacyjnego	25KHz
	Łopatka do pracy ciągłej
Świetłoterapia	kolor czerwony
Świetłoterapia	kolor niebieski
Prąd galwaniczny	+/- 6mA
Częstotliwość ultradźwięków	1Mhz
Max. moc głowic UD	1W/cm2

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA TWARZY I CIAŁA, MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
TRYCHOLOGICZNA

Zakres czasu pracy	30 sekund – 40 minut (ze skokiem co 30 sekund)
Częstotliwość ultradźwiękowa	1 MHz
Napięcie wejściowe	220 – 230V
Moc wyjściowa	0,04 W/cm ² – 0,28 W/cm ²


Zakres natężenia	0,0 mA – 6,4 mA
Zakres skali pulsacji(wypełnienia)	5% – 100%

FALE RADIOWE BIPOLARNE, LASER W GŁOWICACH FAL RADIOWYCH

Czas pracy	0-30 min
Bezpiecznik	1,6A
Napięcie	230 V-50Hz
Moc urządzenia	120W
Częstotliwość	1MHz
Intensywność	5-100W

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Czas pracy	0-30 min
Moc	60 W
Bezpiecznik	1,2A
Napięcie	230 V-50Hz
Max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy	-600 hPa (-0.06 MPa)

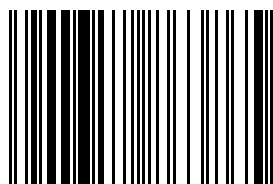

5904358863865