



EXEO-PICO II URZĄDZENIE LASER Q-SWITCHED ND YAG Z KOŃCÓWKĄ PICO

29900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.

URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOLONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

Dzięki zastosowaniu ultrakrótkich impulsów energia światła lasera jest dostarczana do skóry w czasie najkrótszym z możliwych. Zabiegi laserem Exeo są bezpieczne, pozwalają uniknąć bolesnego przegrzania skóry, poparzeń czy ryzyka pozostawienia blizn.

Urządzenie ma szerokie zastosowanie terapeutyczne. Pozwala na skuteczne usunięcie

tatuażu (w tym kolorowego), makijażu permanentnego, przebarwień, blizn i rozstępów.

Przy doborze odpowiedniego filtra laser działa również liftingująco - poprzez stymulowanie naturalnych procesów naprawczych i pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny, wygładza zmarszczki, poprawia napięcie i gęstość skóry.

ZASTOSOWANIE

- * usuwanie tatuażu,
- * usuwanie makijażu permanentnego,
- * zmniejszenie widoczności przebarwień,
- * peeling "black doll" (odmłodzenie skóry, oczyszczenie powierzchni skóry i zatkanych porów, stymulacja regeneracji i odnowy skóry)

USUWANIE TATUAŻU/MAKIAŻU PERMANENTNEGO

Laser neodymowy EXEO Q-SWITCHED skutecznie usuwa tatuaż oraz makijaż permanentny emitując krótkie impulsy światła (poniżej 10 nanosekund) Impulsy są pochłaniane w sposób selektywny przez barwnik tatuażu. Następuje rozerwanie barwnika a jego mikro-fragmenty są wchłaniane przez układ immunologiczny. Każdy kolor barwnika absorbuje inną długość fali. Zabieg jest bezpieczny, precyzyjny i nie wywołuje trwałych obrażeń skóry.

USUWANIE PRZEBARWIEŃ


Usunięcie przebarwień laserem Q-switch nd yag jest możliwe dzięki wysokiej absorpcji promieni lasera w melaninie. Zabieg pozwala na likwidację przebarwień o różnym kształcie i lokalizacjach. Konieczne jest powtórzenie kilku zabiegów w serii w odstępie od 3 do 4 tygodni. Przebarwienia znikają w całości lub w rzadkich przypadkach częściowo. Po zabiegu konieczne jest stosowanie filtrów faktorem >50.

PEELING "BLACK DOLL"

Zabieg polega na "strzałach" promieniem laserowym na skórę twarzy lub dekoltu pokrytej koloidalną pastą węglową. Drobiniki węgla wnikają w najdrobniejsze nierówności oraz pory skóry, a następnie absorbują energię światła lasera nd yag, która powoduje natychmiastowe odparowanie preparatu wraz z zanieczyszczeniami. Efektem jest oczyszczenie i zwężenie porów skóry, ujednolicenie kolorytu, stymulacja produkcji kolagenu, zmniejszenie stanu zapalnego, stymulacja komórek skóry do odbudowy oraz ustabilizowanie wydzielania sebum.

Producent: MLKJ WEIFANG, SINGAPORE
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: VENUS MICHAŁ MATUSZAK, ul. LEGIONÓW 52,
62-800 KALISZ

Spektrum	1064 μ m/532 μ m/755 μ m
Maksymalna energia	1500mj
Czas impulsu	<1000PS
Częstotliwość powtarzania	1-10HZ
Rozmiar plamki 755 μ m	3mm
Rozmiar plamki 1064 μ m	0-9mm
Rozmiar plamki 532 μ m	0-9mm
Napięcie	220-230V
System chłodzenia	chłodzenie cieczą i powietrzem
Pobór mocy	1000W
Żywotność głowicy	500 000 impulsów

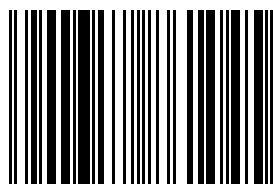

5904358861045