



## **FERRI MEGADERM OXYBRAZJA 11W1**

16400 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Kompaktowych rozmiarów kombajn kosmetyczny zawierający 11 funkcji zabiegowych (w tym oxybrazję tlenową 10 Bar).

### FUNKCJE URZĄDZENIA

- \* oxybrazja tlenowa
- \* mikrodermabrazja diamentowa,
- \* peeling kawitacyjny,
- \* ultradźwięki,
- \* światłoterapia,
- \* jonoforeza,
- \* dermomasaż,
- \* mezoterapia bezigłowa,
- \* fale radiowe bipolarne,

- \* laser biostymulujący w głowicach fal radiowych.

## OXYBRAZJA

Peeling Wodno-tlenowy jest innowacyjnym zabiegiem, wykonywanym przez dwufazowy strumień składający się z mikrokropelek soli fizjologicznej oraz tlenu. Oksybrazja ze względu na brak wywoływanych podrażnień po zabiegu nazywana jest "miękką" dermabrazją. Obok działania peelingu, oksybrazja nawilża oraz dotlenia skórę.

Efekt końcowy peelingu wodno-tlenowego, porównywany jest często do mikrodermabrazji korundowej. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na brak mechanicznego ścierania, zabiegowi mogą poddawać się osoby cierpiące na cerę naczynkową, skłoną do rumienia. Oksybrazja jest również wskazana dla osób z trądzikiem.

Zabieg w większości przypadków jest bardzo dobrze odbierany przez klientki, nie łączy się z dyskomfortem jaki można odczuwać przy dermabrazji diamentowej. Skóra po zabiegu jest gładka, delikatna, dotleniona i nawilżona.

## DANE TECHNICZNE

- \* oksybrazja przygotowana jest do pracy na czystym tlenie z zastosowaniem butli tlenowej bez pompy powietrza,
- \* reduktor zmniejszający ciśnienie z 200 bar do 6 bar, maksymalne ciśnienie na pistolecie – 10 bar,
- \* pistolet oraz sól fizjologiczna w zestawie,
- \* możliwość regulacji dawkowania soli fizjologicznej w zakresie od 0-50gr/min,
- \* możliwość pełnej regulacji natężenia przepływu tlenu,
- \* możliwość dawkowania kosmetyków podczas zabiegu (mezoterapia tlenowa).

## MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA

Mikrodermabrazja diamentowa to zabieg w pełni kontrolowanego złuszczenia warstwy rogowej naskórka za pomocą głowic diamentowych o różnej gradacji z płynną regulacją podciśnienia. W efekcie uzyskujemy odświeżenie skóry i stymulację podciśnieniem w procesie wytwarzania kolagenu.

## DZIAŁANIE

- \* rozjaśnianie przebarwień skóry,
- \* spłycenie blizn,
- \* stymulacja krążenia dzięki miejscowemu przekrwieniu,
- \* oczyszczanie cery,
- \* likwidacja zmarszczek.

## DANE TECHNICZNE

- \* czas pracy – 0-30 min,
- \* moc – 60 W,

- \* bezpiecznik – 1,2A,
- \* napięcie – 230 V-50Hz,
- \* max podciśnienie mierzone na zakończeniu głowicy: -600 hPa (-0.06 MPa).

PEELING KAWITACYJNY, ULTRADŹWIĘKI, SONOFOREZA, ŚWIATŁOTERAPIA LED, KOLOR CZERWONY I NIEBIESKI, GALWAN, JONOFOREZA, ELEKTROSTYMULACJA PRĄDEM NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI


Kawitacja to zjawisko powstające na powierzchni skóry pod wpływem działania fali ultradźwiękowej i cieczy. W warstwie rogowej powstają pęcherzyki powietrza, które w wyniku zmiennego, wewnątrzcząsteczkowego ciśnienia ulegają mini eksplozjom, wytwarzając mikro energię, która usuwa martwe już keratocyty.

#### ZALETY

- \* mechaniczne i przyjemne oczyszczanie cery,
- \* urządzenie do pracy ciągłej,
- \* 3 rodzaje sterowania łopatką,
- \* łączenie z jonoforezą,
- \* 2 głowice ultradźwiękowe o ergonomicznych kształtach.

#### DANE TECHNICZNE

- \* czas pracy – 0-30 min,
- \* bezpiecznik– 1,2A,
- \* napięcie – 230 V-50Hz,
- \* częstotliwość peelingu kawitacyjnego – 25KHz,
- \* łopatka do pracy ciągłej,
- \* światłoterapia kolor czerwony,
- \* światłoterapia kolor niebieski,
- \* prąd galwaniczny +/- 6mA,
- \* częstotliwość ultradźwięków-1Mhz,
- \* max. moc głowic UD – 1W/cm<sup>2</sup>.

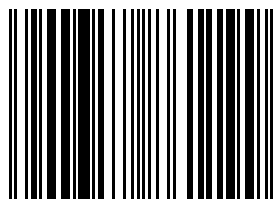

5904358861199