



## **ENDERMO-SHAPER 360 (ENDERMOMASAŻ + RF + PODCZERWIĘŃ)**

52900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

Dla bezpieczeństwa używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.  
Urządzenie o zastosowaniu niemedyceznym, przewidziane do stosowania również przez laików (uprzednio przeszkolonych, zapoznanych z instrukcją używania lub etykietą).

Nowoczesne, kosmetyczne urządzenie do endermomasażu wykorzystujące 4 głowice zabiegowe.

### CZYM JEST ENDERMOMASAŻ?

Endermomasaż jest nieinwazyjną metodą terapii próżniowej połączonej z działaniem samojezdnych rolek oraz fali radiowej bipolarnej.

Zabieg urządzeniem jest całkowicie nieinwazyjny, daje świetne efekty w walce z cellulitem, przyspiesza metabolizm, zwiększa trofikę tkanek i modeluje sylwetkę. Zасыanie fałdu skórnoгo rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa się metabolizm czyli również szybkość usuwania toksyn z komórek. Limfa zostaje odprowadzona poprzez ruch rolek głowicy zabiegowej. Fala radiowa bipolarna działa bezpośrednio na skórę oraz tkanki podskórne. Rozgrzewa tkanki do 60 Stopni celsjusza, obkurczając włókna kolagenowe. Skóra staje się bardziej sprężysta i zdecydowanie gęstsza.

#### GŁOWICE ZABIEGOWE

- \* Głowica na talię i brzuch (IR, RF, LED, podciśnienie, masaż mechanicznymi rolkami) - 60cm<sup>2</sup>
- \* Głowica na ramiona, uda (IR, RF, LED, podciśnienie, masaż mechanicznymi rolkami) - 30cm<sup>2</sup>
- \* Głowica na twarz i szyję (RF, LED, podciśnienie) - 5cm<sup>2</sup>
- \* Głowica na okolice oczu (RF, podciśnienie) - 1,5cm<sup>2</sup>

#### ENDERMO-SHAPER 360 ŁĄCZY W SOBIE 4 TECHNOLOGIE W WALCE Z CELLULITEM I BRAKIEM JĘDRNOŚCI..

1. RF rozgrzewa skórę, ujędnia ją i czyni bardziej elastyczną. RF W URZĄDZENIU NIE SŁUŻY DO LIPOLIZY, ZMNIEJSZANIA, USUWANIA TKANKI TŁUSZCZOWEJ.
2. Podciśnienie polepsza odprowadzanie limfy.
3. Mechaniczny masaż rolekowy wywołuje drenaż.
4. Światłoterapia LED stymuluje tkankę podskórną.
5. Podczerwień (IR) zwiększa dotlenienie tkanek, rozszerza naczynia krwionośne, przyspiesza metabolizm komórkowy.


#### TRYBY PRACY ROLEK

- \* Rotacja przód: modelowanie sylwetki, likwidowanie obrzęków, zmniejszenie tonusu mięśniowego.
- \* Rotacja wsteczna: modelowanie sylwetki, likwidowanie obrzęków, zmniejszenie tonusu mięśniowego.
- \* Rotacja wewnętrzna: poprawa wyglądu skóry.
- \* Rotacja zewnętrzna: Redukcja cellulitu, ujędrnienie skóry.

\*Produkt nie służy do lipolizy, usuwania tkanki tłuszczowej.

Pobór mocy	1000W
Podciśnienie	40-90Kpa
Moc wyjściowa RF	50W

Częstotliwość RF	10MHZ
Prędkość rolku	120RPM
Kierunki rotacji rolki	4 kombinacje
Napięcie	220-230V
Moc wyjściowa IR	20W
Długość fali IR	940nm
Długość fali LED	650nm
Moc diody Led	5W
Wyświetlacz	LCD, dotykowy, 10"
Wymiary	56x47x110

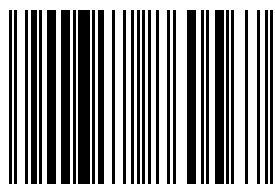

5904358860567