



ARISA SHR, IPL, ELIGHT

20900 zł brutto

 [Przejdź na stronę produktu](#)

DLA BEZPIECZEŃSTWA UŻYWAJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ. URZĄDZENIE O ZASTOSOWANIU NIEMEDYCZNYM, PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA RÓWNIEŻ PRZEZ LAIKÓW (UPRZEDNIO PRZESZKOŁONYCH, ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ).

SUPER HAIR REMOVAL

Trwałe usunięcie niechcianych włosów jeszcze nigdy nie było tak proste i komfortowe. Epilacja za pomocą światła polega na zniszczeniu komórek macierzystych w rejonie wyrzuszenia, nie zaś – jak powszechnie się uważa zniszczeniu cebulki. Impuls świetlny jest absorbowany w chromoforze – melaninie włosa, która staje się jego nośnikiem – za jej pomocą dociera do mieszka, gdzie gwałtownie podnosi temperaturę wywołując destrukcję komórek macierzystych.


Z uwagi na cykl życia włosów, do trwałego usunięcia owłosienia należy wykonać kilka zabiegów w odpowiednim odstępie czasu, tak by wszystkie włosy były poddane

działaniu światła w aktywnej fazie wzrostu (tzw. anagen). Ponadto przeprowadzając epilację warto pamiętać, że im grubszy jest włos, tym dłuższy impuls należy wybrać. Epilacja jest najbardziej efektywna u osób o jasnej karnacji i ciemnych grubych włosach.

ARISA SHR oferuje epilację przy pomocy łączonej techniki IPL i RF. Synergia tych metod, dzięki wyższej skuteczności, polecana jest nawet osobom o drobnych, jasnych włosach. Jak wynika z badań, jednoczesne operowanie światłem i częstotliwości radiowej jest najbezpieczniejszą i najbardziej skuteczną metodą usuwania "trudnych włosów" – jasnych czy znajdujących się na twarzy np. nad wargą.

PRODUCENT: SUNWIN HK

system	SHR
gęstość energii	1-50J/cm2
sekwencje impulsów	1-10Hz
przebieg pulsowania	05~99ms, możliwość regulacji
częstotliwość RF	1-10Mhz
Kryształ	12x30mm
Pobór	2000W
Szerokość sub-pulsowania	0.1~9.9ms, możliwość regulacji
Temperatura chłodzenia	-10°C~0°C, możliwość regulacji
System chłodzenia	Powietrze + Woda + półprzewodnik

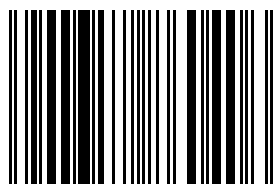

5904358860406